

So finden Sie den richtigen BH

1. Ermitteln des Unterbrustmaßes in cm ergibt die BH-Größe.
2. Ermitteln des halben Überbrustmaßes und gemessene cm mit zwei multiplizieren ergibt die Cup-Größe.
3. Ermitteln der exakten BH-Größe mit Hilfe der Maßtabelle.

Hinweis: Bei allen Messungen immer auf korrekten waagerechten Verlauf des Maßbandes achten! Die Überbrustmaße sollten immer mit gesenkten Armen genommen werden, da sich sonst Fehler beim Abmessen einstellen können!

Das Unterbrustmaß

Zur Größenberechnung bei BH und Einteiler wird mit dem 5er-Sprung des Unterbrustmaßes gearbeitet. Dabei enden die Größen jeweils auf »0« oder »5«. Diese Größen lassen sich durch das Messen des Unterbrustmaßes ermitteln, sie liegen immer in der Mitte von 5 Zahlen.


68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 ...

Ein Unterbrustmaß zwischen 73 und 77 Zentimetern entspricht somit der BH-Größe 75, ein Unterbrustmaß zwischen 78 und 82 Zentimetern der BH-Größe 80 usw.

Rat für die Praxis

Unterbrust:
Direkt unter der Brust gemessen

Halbes Überbrustmaß:
Über Brustspitze gemessen – von Brustmitte bis Rückenmitte

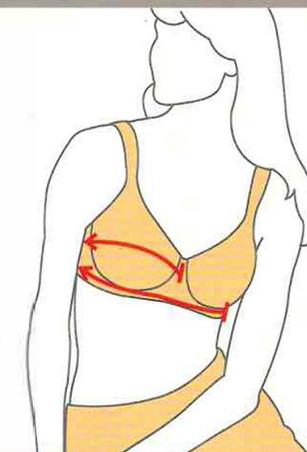

Unterbrustmaße in cm zwischen

63-67	68-72	73-77	78-82	83-87	88-92	93-97	98-102	103-107	108-112	113-117	118-122
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	---------	---------	---------	---------

ergibt BH-Größe

65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120
----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----

Überbrustmaß in cm ergibt den dazugehörigen BH-Cup

AA	75-77	80-82	85-87	90-92	95-97	100-102	105-107	110-112	115-117	120-122	125-127	130-132
A	77-79	82-84	87-89	92-94	97-99	102-104	107-109	112-114	117-119	122-124	127-129	132-134
B	79-81	84-86	89-91	94-96	99-101	104-106	109-111	114-116	119-121	124-126	129-131	134-136
C	81-83	86-88	91-93	96-98	101-103	106-108	111-113	116-118	121-123	126-128	131-133	136-138
D	83-85	88-90	93-95	98-100	103-105	108-110	113-115	118-120	123-125	128-130	133-135	138-140
E	85-87	90-92	95-97	100-102	105-107	110-112	115-117	120-122	125-127	130-132	135-137	140-142
F	87-89	92-94	97-99	102-104	107-109	112-114	117-119	122-124	127-129	132-134	137-139	142-144
G	89-91	94-96	99-101	104-106	109-111	114-116	119-121	124-126	129-131	134-136	139-141	144-146

Zuordnung der Prothesengröße zur BH-Größe:

Die hier aufgezeigten Erläuterungen sind eine Hilfestellung, um Ihnen die Anpassung einer Prothese und des BHs zu erleichtern. Lassen Sie Ihre Erfahrung und Gespür einfließen, denn je nach Körperbau und Art der Operation können Abweichungen auftreten! Eine T-Shirt-Probe wird Ihnen zeigen, ob eine gute Anpassung erfolgt ist.

Cupgröße	Unterbrustweite																	
AA	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120						
A	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120					
B			65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120				
C				65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120			
D					65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120		
E						65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	
F							65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120
G										75	80	85	90	95	100	105	110	115

Brustprothesen

Contact Energy Natura Essential

Prothesengröße

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15* 16* 17*

* Nur erhältlich als Amoena Essential Light und Amoena Natura Light

Postoperative Versorgung

Priform

PurFit

Prothesengröße

1/2 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12 13/14
4 6 8 10 12

So finden Sie die richtige Amoena Cup Form:

Cupgröße	Cupform		
	1 Flach	2 Mittel	3 Voll
A			
B			
C			
D-G	Die Cupformen sind beispielhaft abgebildet für die Größen A-C, sie sind auch erhältlich für die Größe D-G.		

Die weibliche Brust unterscheidet sich nicht nur durch Cupgröße und Unterbrustweite, sondern auch durch die Brustform. Um für jede Frau die richtige Form zu finden, bietet Amoena drei verschiedene Cupformen an. Diese sind durch die Nummer 1 - 3 (entsprechend flache, mittlere und volle Form) in den Brustprothesen-Namen enthalten, z. B. Amoena Contact 2S.

Ermitteln Sie daher zunächst mit der BH-Größe die Cupgröße (z. B. 80 B). Dann fahren Sie fort mit der Auswahl der Cupform. Dazu vergleichen Sie die Abbildungen unten mit dem Profil der verbliebenen Brust der Frau, während sie einen BH trägt. Wählen Sie die Cupform, die am besten passt.

